

**Beschreibung**

Partikelfiltrierende Atemschutzmaske, leistet effektiven Atemschutz mit hohem Tragekomfort. Konzipiert zum Schutz der Atemwege schützt sie wirksam vor Feinstaub-Partikeln und Aerosolen. Die Atemschutzmaske bietet durch Ihren besonderen Tragekomfort und der hohen Atmungsaktivität viele Vorteile speziell für Senioren und Risikopatienten.

**Dermatologisch getestet und Latexfrei**

Die hochwertige Atemschutzmaske ist dermatologisch mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ getestet worden und frei von Latex. Daher ist sie besonders für sensible Haut und Allergiker geeignet.

**Tragekomfort für Brillenträger**

Der biegsame Nasenbügel und der innenliegende Komfort-Dichtstreifen sorgen dafür, dass die Maske eng anliegt. Damit wird das Entweichen warmer Atemluft Richtung Brille verhindert und somit lästiges Beschlagen reduziert.

**Anwendungsbereich**


Die folgende Auswahlhilfe dient nur als Überblick über typische Anwendungsbereiche. Sie darf nicht als einzige Grundlage für die Auswahl eines Produktes herangezogen werden. Die Auswahl der am besten geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) hängt von der jeweiligen Situation ab und darf nur durch eine sachkundige Person erfolgen. Diese Person muss sich mit den Risiken, Arbeitsbedingungen und Beschränkungen der PSA auskennen.

Anwendungsbeispiel	FFP1	FFP2	FFP3
Bohrarbeiten	●	●	
Holzverarbeitung		●	●
Steinbrucharbeiten		●	●
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	●	●	●
Schleifen/Fräsen	●	●	●
Reinigungsarbeiten	●	●	●
Schädlingsbekämpfung (Wasserbasis)		●	●
Bauarbeiten	●	●	●
Abrissarbeiten		●	●
Spritzbetonieren		●	●
KMF-Verarbeitung		●	●
Anlagen- und Gerätewartung		●	●
Siloarbeiten		●	●
Pandamievorsorge		●	●

**Vorteile**

- ✓ 4-Lagen aus hochwertigem Vliesstoff für angenehmen Tragekomfort, hohe Atmungsaktivität und hohe Filtereffizienz:
  - 1: Super-weicher Vliesstoff (35g/m<sup>2</sup>)
  - 2: Schmelzgeblasener Elektret-Vliesstoff (25g/m<sup>2</sup>)<sup>1</sup>
  - 3: Schmelzgeblasener Elektret-Vliesstoff (25g/m<sup>2</sup>)<sup>1</sup>
  - 4: Vliesstoff (60g/m<sup>2</sup>)
- ✓ Innenliegender Komfort-Dichtstreifen
- ✓ Biegsamer Nasenbügel aus doppeltem Metallstreifen
- ✓ Widerstandsfähige Ohrschalen aus angenehmen Material<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Der Vliesstoff wird mit einem mit einem speziellen „water electret“-Verfahren behandelt. Damit wird eine dreifach höhere elektrostatische Absorptionsfähigkeit erreicht als mit dem konventionellen „static electret“-Verfahren. Das bedeutet, dass mit unserem Verfahren über die gesamte Tragedauer eine deutlich höhere und konstante Filtereffizienz erreicht wird.  
<sup>2</sup> Widerstandsfähig bis zu 20 Newton (= ca. 20 kg) Gegengewicht.

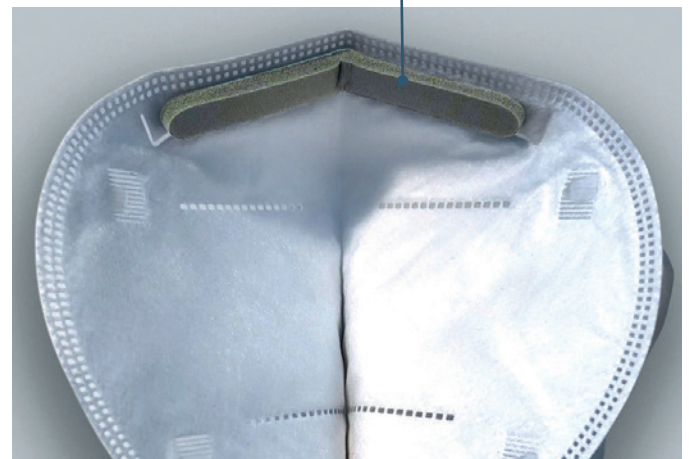

**Normen**

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009, filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel. Zu den Leistungsprüfungen dieser Norm gehören Filterdurchlass, Entflammbarkeit, Atemwiderstand und die Gesamtleckage nach innen.

Zusätzlich wurde der Dolomitstaubtest durchgeführt. Somit weist die Atemschutzmaske eine sehr hohe Aufnahmefähigkeit, zuverlässige Filterleistung und eine längere Standzeit auf.

EU-Konformitätserklärung – Abrufbar unter: [www.dk-medical.de/FFP2\\_00123-DOC\\_GER](http://www.dk-medical.de/FFP2_00123-DOC_GER)

**Kennzeichnungen**

- FFP2** Schutzklasse
- NR** Einweg
- D** Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung

