

OP-Atemschutzmaske 3-lagig

Typ II

BFE ≥ 98%

EN 14683:2019+AC:2019

Beschreibung

3-lagige, blaue medizinische Atemschutzmaske vom Typ I mit hoher bakterieller Filterleistung und ausgezeichneter Atmungsaktivität.

Die Atemschutzmaske hilft dabei, Infektionskrankheiten nicht durch Niesen und Husten zu verbreiten und trägt so zur Verminderung des Risikos einer Infektionsverbreitung insbesondere in epidemischen oder pandemischen Situationen bei.

Anwendungsbereich

Die Atemschutzmaske dient dem optimalen Schutz der Patienten und des Personals im medizinischen Umfeld um die Übertragung von Krankheitserregern mit der Atmung zu verhindern.

Vorteile

- ✓ 3-Lagen aus hochwertigem Vliesstoff für angenehmen Tragekomfort, hohe Atmungsaktivität und hohe Filtereffizienz:
 - 1: Super-weicher Vliesstoff (25g/m²)
 - 2: Schmelzgeblasener Elektret-Vliesstoff (25g/m²)¹
 - 3: Blauer-Vliesstoff (25g/m²)
- ✓ Komfortabler Nasenbügel
- ✓ Widerstandsfähige Ohrschalen aus weicher Baumwolle²
- ✓ Latex- und Glasfaser frei

¹ Der Vliesstoff wird mit einem mit einem speziellen „water electret“-Verfahren behandelt. Damit wird eine dreifach höhere elektrostatische Absorptionsfähigkeit erreicht als mit dem konventionellen „static electret“-Verfahren. Das bedeutet, dass mit unserem Verfahren über die gesamte Tragedauer eine deutlich höhere und konstante Filtereffizienz erreicht wird.

² Widerstandsfähig bis zu 10 Newton (= ca. 10 kg) Gegengewicht.

Normen


Die Atemschutzmaske entspricht der europäischen Norm EN 14683:2019+AC:2019. Mit der Norm werden folgende Leistungsanforderungen überprüft, um einen Qualitätsstandard sicherzustellen: Bakterielle Filterleistung (BFE), Atemwiderstand, Mikrobiologische Reinheit und Druck des Spritzwiderstandes.

Technische Daten

- Bakterielle Filterleistung (BFE): ≥ 98%
- Atemwiderstand: < 40 (Pa/cm²)
- Mikrobiologische Reinheit: ≤ 30 (KBE/g)
- Druck des Spritzwiderstandes: nicht relevant

Verpackungseinheiten

Art.Nr.	Verpackungseinheiten
00104	50 Stück (10×5) Schachtel
00106	5 Stück Beutel
00107	10 Stück Beutel

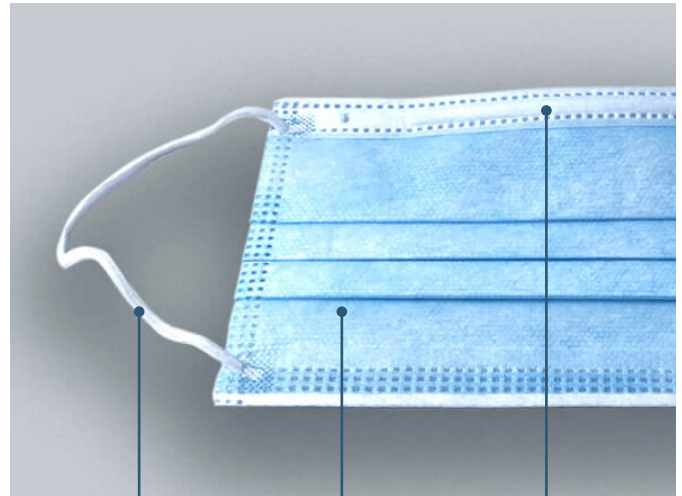

Widerstandsfähige Ohrschalen Hochwertiger, 3-lagiger Vliesstoff Biegsamer Nasenbügel

